




艺卓医疗显示解决方案
RadiForce®

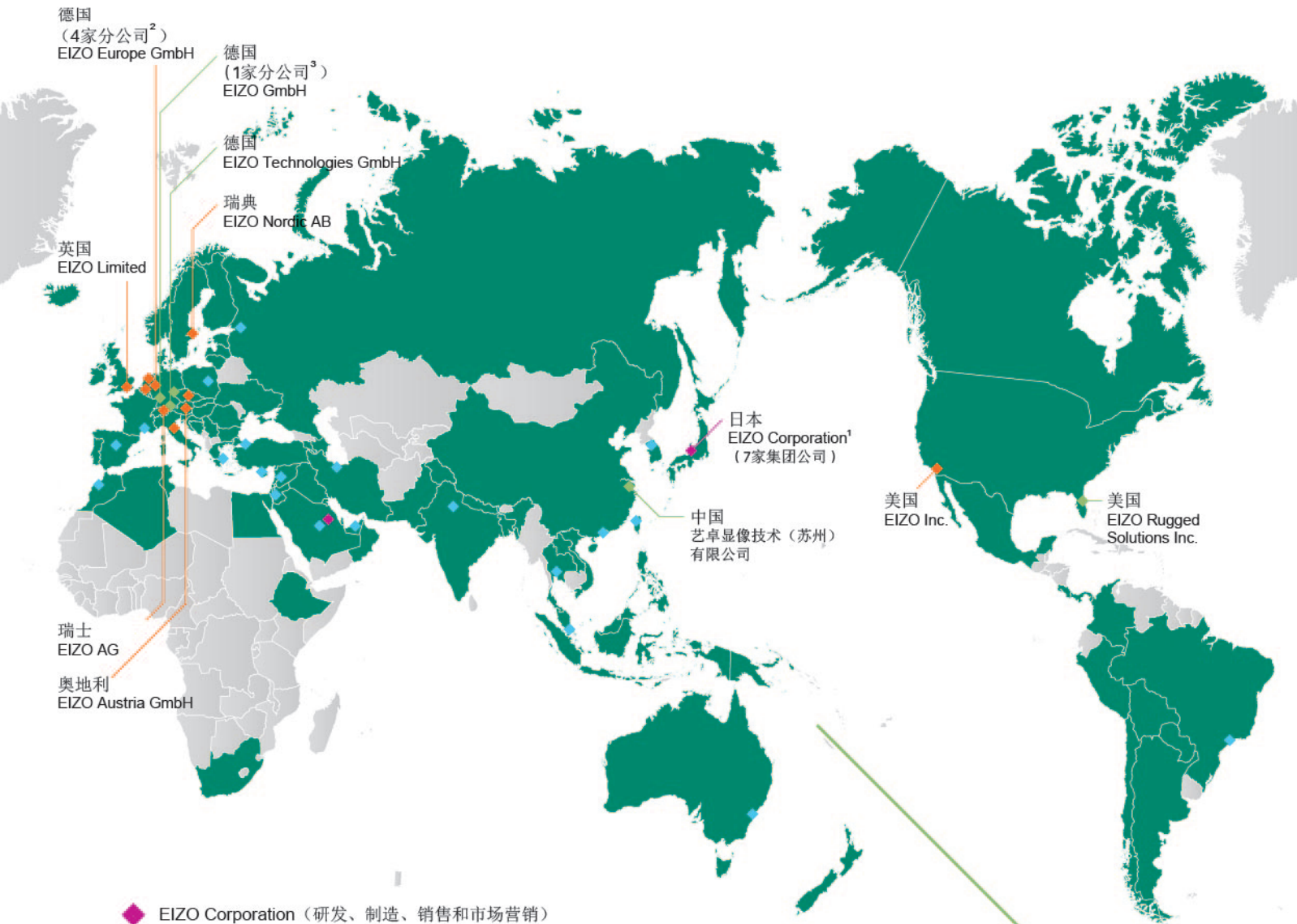

- ◆ EIZO Corporation (研发、制造、销售和市场营销)
- ◆ 集团公司 (研发、制造、销售和市场营销)
- ◆ 集团公司 (销售和市场营销)
- ◆ 分销商
- ◆ 销售EIZO产品的国家

¹ EIZO Corporation 在沙特阿拉伯设有分公司。

² EIZO Europe GmbH 的总部位于德国，在比利时，意大利，荷兰和捷克共和国设有分公司。

³ EIZO GmbH 的总部位于吕茨海姆，在 Plauen 设有分公司。

EIZO、EIZO Logo商标、ColorEdge、CuratOR、DuraVision、FlexScan、FORIS、RadiCS、RadiForce、RadiNET、Raptor和ScreenManager是EIZO Corporation在日本和其他国家的注册商标。RadiLight和Re/Vue是艺卓公司的商标。DICOM 是美国国家电气制造商协会的注册商标，用于其与医疗信息数字通信相关的标准出版物。所有其他公司名称、产品名称和徽标是其各自公司的商标或注册商标。规格如有变更，恕不另行通知。

版权所有©2021 艺卓公司。保留所有权利。

EIZO Corporation

艺卓中文官网：www.eizo.com.cn

产品查询：info.cn@eizo.com


销售及技术咨询：400-928-0522

官方微信

官方微博



CAT-RADIFORCE-Y2105

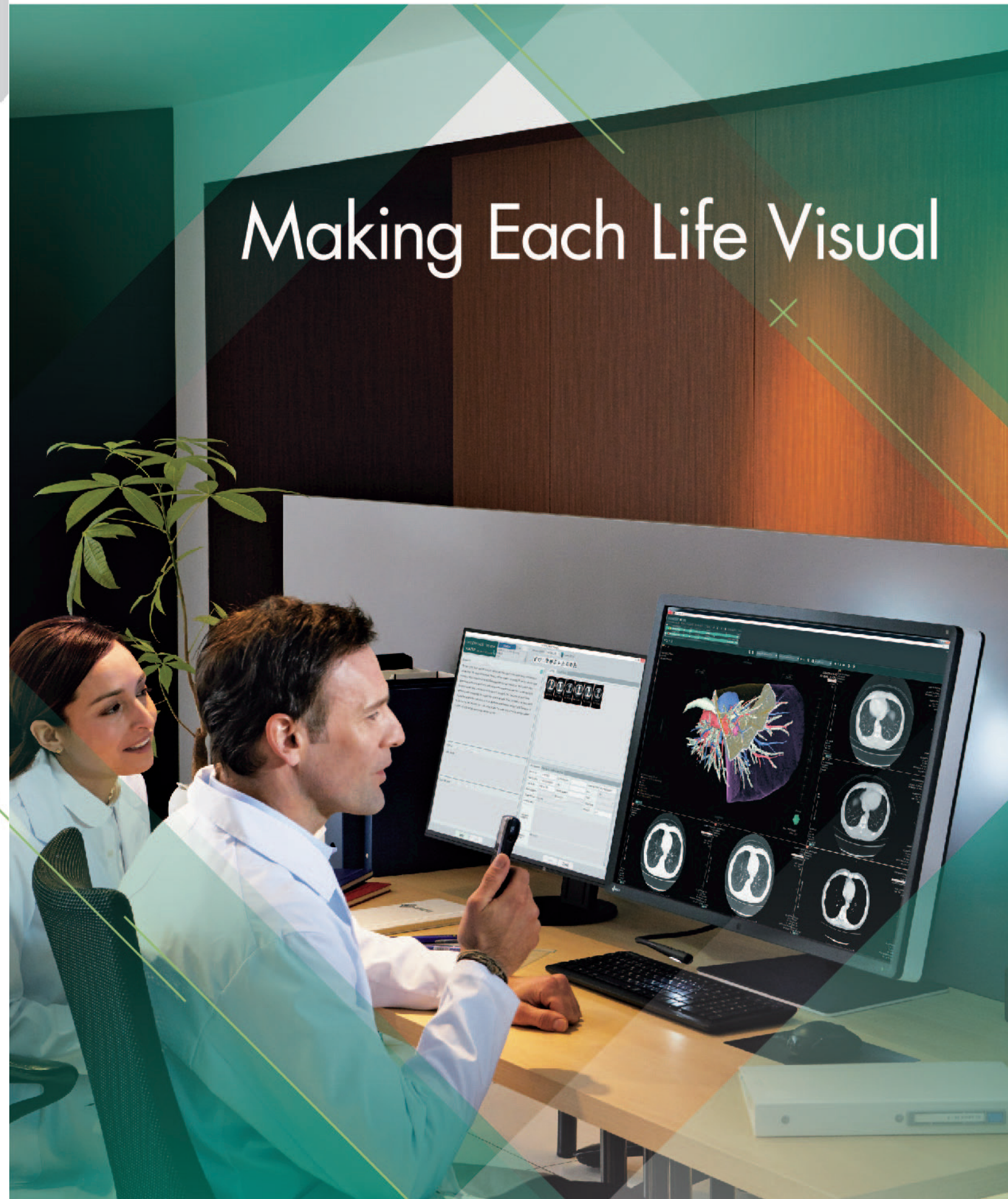

Making Each Life Visual

Making Each Life Visual

每个生命都是独一无二的, 所受的医疗服务也各有不同。

在精准医学时代, 生物技术、人工智能和信息技术的发展为诊断、预防和治疗开辟了全新的途径。

要做到精准, 就需要掌握全方位的信息。因此, 收集、链接和分析数据, 以及记录、存储和评估图像数据成为了现代医务工作的重要资源。

更快治愈, 更好生活: 技术革新对医院和手术室的医疗流程有着立竿见影的影响。这就是为什么我们利用所积累的经验, 并与高规格医疗团队合作, 在精准医疗时代生产可靠图像数据处理系统的原因。

我们的知识旨在为更好的健康服务。
每个人都值得拥有健康。

Making Each Life Visual.




医疗显示解决方案 RadiForce®

RadiForce 特别设计的100万到1200万像素灰阶和彩色显示器，充分满足了医院对于不同类型的医疗显示器既要符合 DICOM® Part 14标准，同时还要具备高性能从而达到精确诊断的需求。



以合适的分辨率观看

不同设备生成的医学影像显示的尺寸和信息量方面是各不相同的。RadiForce显示器具有广泛的分辨率范围，能够满足每一种设备的影像显示要求。

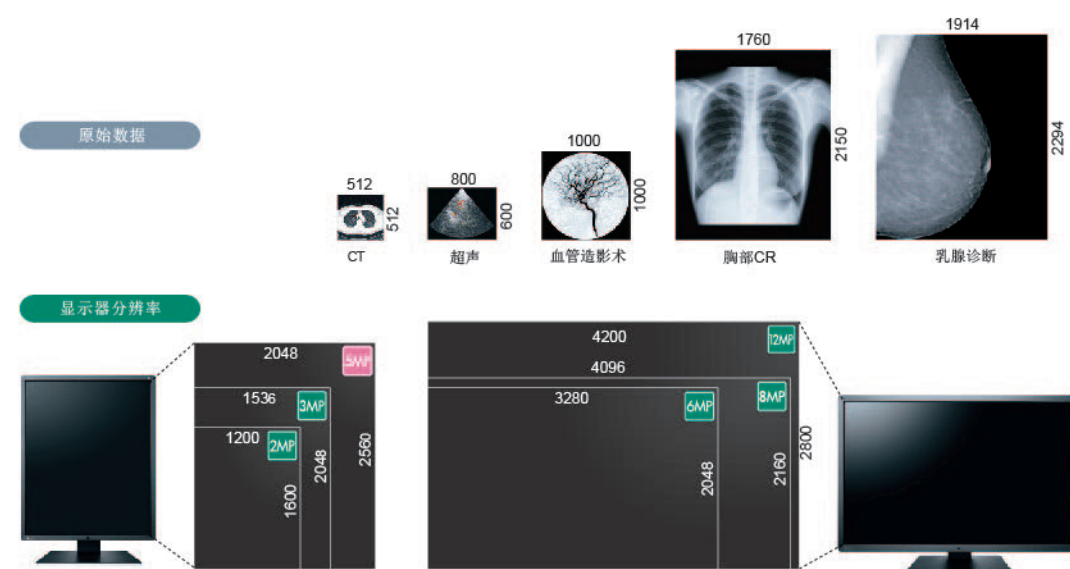

精确诊断



艺卓仔细测量并设定了每个灰阶，使显示器符合DICOM Part 14标准。此外，在启动或唤醒时，艺卓专利的漂移修正功能可快速稳定亮度水平，并补偿由环境温度和时间推移所引起的亮度偏差，从而以稳定的亮度和灰度如实地再现医学影像。

MS236WT具有DICOM预设模式，提供优秀的医学影像浏览效果。

轻松管理质量控制

集成前置传感器(IFS)可测量亮度和灰度色调，根据DICOM Part 14进行校准。IFS使用时不会干扰观看区域，因此可降低对显示器进行质量控制所需的工作量和维护成本。

适用于所有型号，MX242W、MX194和MS236WT 除外。





整个屏幕均匀显示

液晶显示器的特性导致屏幕不同部分的亮度和色度偏差，数字均匀均衡（DUE）功能可帮助解决这一问题，以呈现更为平滑的影像。


适用于所有型号，MS236WT 除外。



为不同模态选择合适的模式


CAL Switch功能可为不同模态如CR、CT和内窥镜选择不同的显示模式。通过显示器前端按钮可轻松切换到最佳影像查看状态。

模式的数量或类型因型号而异。参考第20-23页的规格。

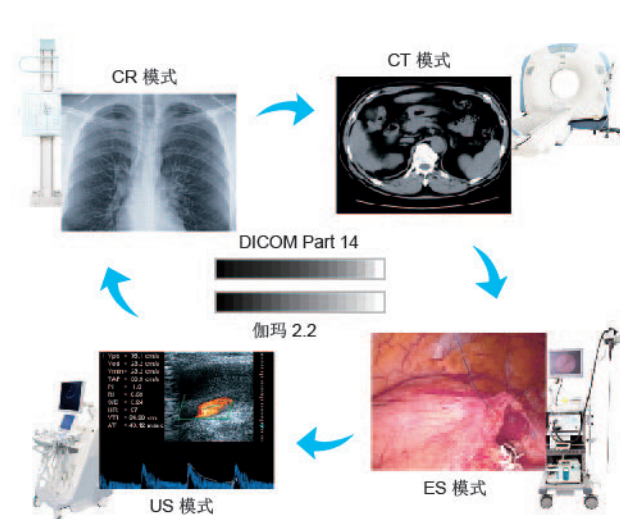

多样化产品满足特定用户需求


艺卓提供防眩光（AG）和防反射（AR）屏幕以满足不同用户环境需求。防眩光处理适合异常明亮的环境，大大减少了环境照明的眩光。防反射处理适合亮度中等的环境，在降低轻微屏幕眩光的同时保持清晰的文本和影像显示效果。

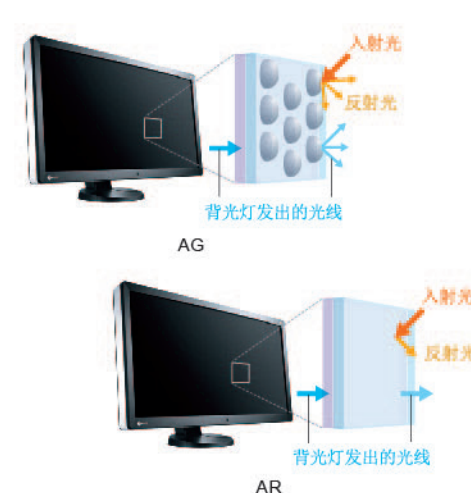

同时显示灰阶和彩色像素

混合伽玛PXL功能逐像素自动区分灰阶和彩色影像，创建的混合显示使每个像素都具有最适合的灰阶。因此，灰阶影像（例如X光、MRI和CR）能够以与DICOM Part 14曲线对应的灰阶进行显示，而彩色影像（例如超声波和内窥镜）能以伽玛2.2曲线色阶如实再现。这就提高了在同一个屏幕上同时查看灰阶和彩色影像时的效率。

参考第20-23页的规格是否可用。

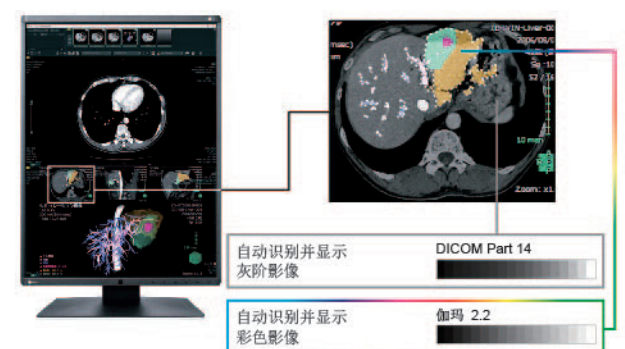




智能感应节省能耗

一些型号配备了人体感应传感器，会在用户离开时提示显示器切换到节能模式，并会在用户返回时立即恢复运行。这以确保显示器在不使用时节约能耗。


适用于所有型号，RX1270和MX216 除外。

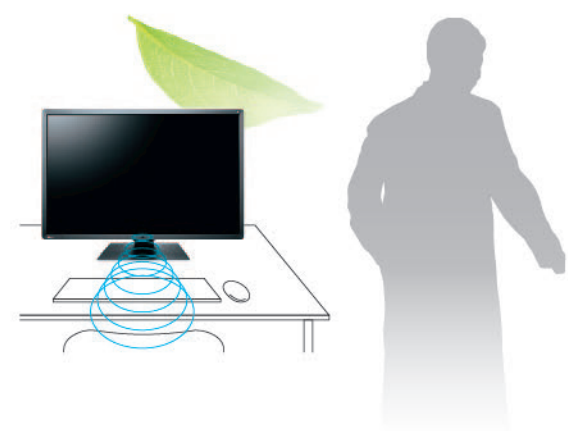

对亮度稳定性充满信心


艺卓在其产品质量方面的信心延伸至亮度稳定性，并将其纳入规定质保范畴之中。

适用于所有型号，MS236WT 除外。

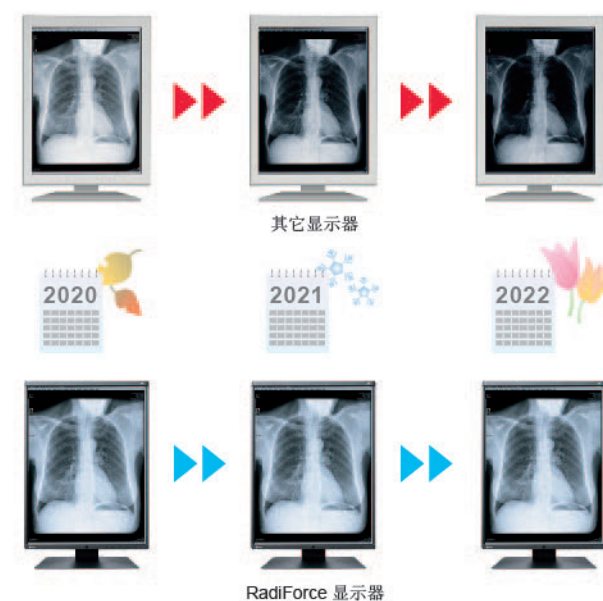


提高操作性

艺卓的人体工程学底座可实现倾斜、旋转和高度范围调节，让您更舒适地使用显示器。

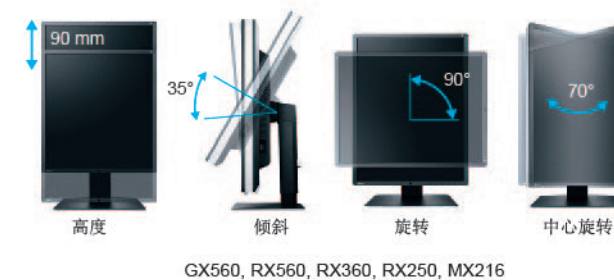

MS236WT 配有可调节倾斜支架，以方便使用触控笔。

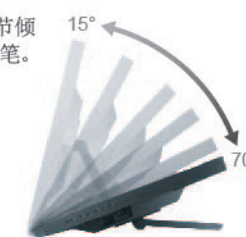


轻松安装

艺卓与商务伙伴合作，验证医疗工作站和台式电脑与艺卓显示器的兼容性。凭借多年的经验和专业知识，我们会在新品工作站和电脑发布后立即对其进行专业测试。在非常重视可靠性的医疗领域，艺卓提供轻松安装的保证。

我们验证如下方面：

- ✓ 与工作站/PC的稳定运行
- ✓ 可以正确显示DICOM医学影像

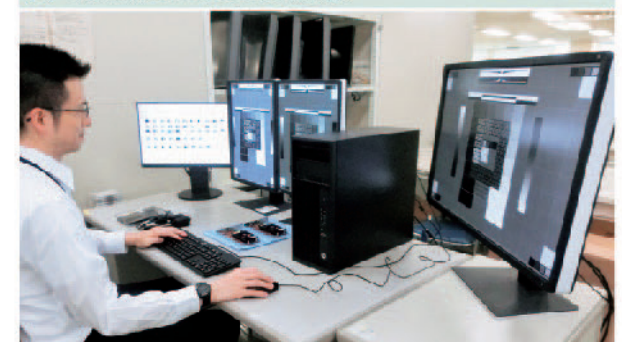

RadiForce® Multi 系列

随着医学影像技术多年以来不断发展，医院需要处理各种大容量的影像数据。RadiForce多模态系列所具备的超高分辨率可实现在一个屏幕上显示多种模态，这是医学发展的重要一步。



12MP RX1270
78.4 cm (30.9") 彩色液晶显示器



8MP RX850
79 cm (31.1") 彩色液晶显示器



6MP RX660
76 cm (30.0") 彩色液晶显示器

提升您的阅片体验

随着更多的影像模态实现数字化，放射科医师将在屏幕上阅读越来越多的信息。艺卓独有的“Work-and-Flow”技术可以优化放射科医师的工作环境，降低影像工作流程的复杂性。用户可在RadiForce显示器与RadiCS LE软件的搭配下充分使用“Work-and-Flow”功能。

Work-and-Flow



了解艺卓独有的“Work-and-Flow”功能如何节约您的时间与空间。

www.eizo.com.cn/global/products/videos/workandflow/

快速信息索引

用户可利用“Hide-and-Seek”功能轻松隐藏当前不用的PinP（画中画）窗口。在需要时，将鼠标光标移到屏幕边缘或按指定的热键，就可以重新打开该窗口。这样无需额外的显示器就可以快速高效地查阅报告、患者病历及其他信息。

参考第20-23页的规格是否支持。



Hide-and-Seek

无障碍的工作方式

通过“Switch-and-Go”功能，您可以使用一套键鼠同时操作两个不同的工作站。通过将光标从一个屏幕移动到另一个屏幕，可以在多个显示器上工作，或者根据需要在工作站之间切换信号，而无需每次都更换鼠标或键盘。这可以减少工作流程中的显示器数量并提高工作效率。

参考第20-23页的规格是否支持。




Switch-and-Go



多模态高性能

多模态显示器能够显示适应多种设备的不同影像，如CR、DR、MRI、CT和超声波。多模态支持在同一屏幕上极其精确地查看各种医学影像，从而提高工作效率。

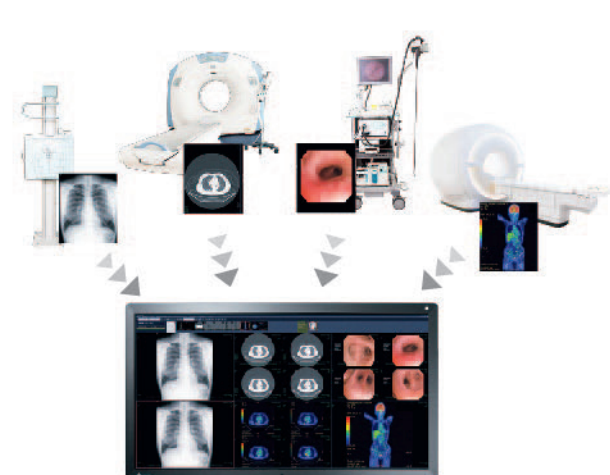

无缝查看图像

RadiForce 多模态显示器可以查看并排列的影像，不会出现多显示器设置中常见的突兀边框。这可防止眼睛在两个屏幕间移动时中断视线，进而提高阅读效率。



RadiForce Mammo 系列

在早期乳腺癌检测中，显示器能否显示准确一致的高质量图像是至关重要的。艺卓专为显示乳腺图像的RadiForce Mammo系列显示器，让您在诊断时充满信心。



12MP RX1270
78.4 cm (30.9") 彩色液晶显示器

MammoDuo 在专门设计的支架上并排集成
两台500万像素的显示器。


GX560 MammoDuo RX560 MammoDuo

500万像素显示器采用7.5mm超窄边框，两台显示器可见屏幕之间的总距离仅为15mm。此外，边框厚度仅为2.5mm，确保您的视线在屏幕之间轻松切换。



5MP 5MP RX560-MD
54.1 cm (21.3") 彩色液晶显示器双屏幕配置

5MP RX560
54.1 cm (21.3") 彩色液晶显示器

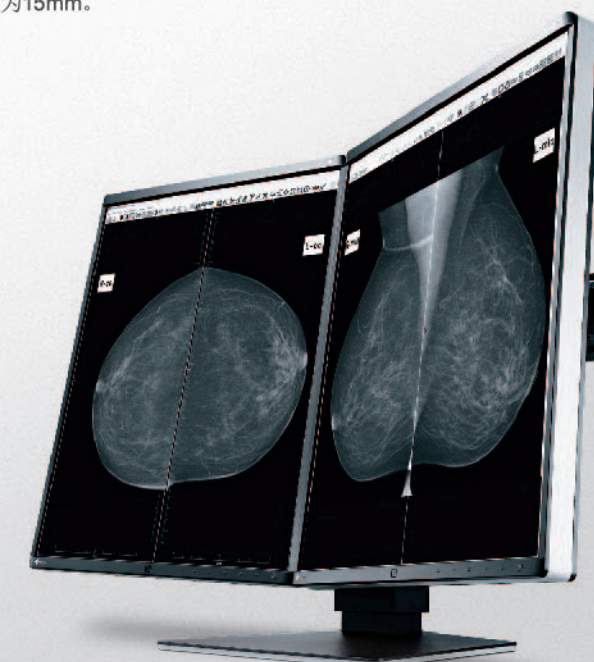

5MP 5MP GX560-MD
54.1 cm (21.3") 灰阶液晶显示器双屏幕配置

5MP GX560
54.1 cm (21.3") 灰阶液晶显示器

Work-and-Flow



艺卓独有的功能可以突出显示屏幕的特定区域，使您更容易集中精力进行解读。

www.eizo.com.cn/global/i/workandflow2/



快速简便的聚焦方式

借助"Point-and-Focus"功能，只需使用鼠标和键盘就能快速选择并聚焦目的屏幕区域。改变屏幕上某些点的亮度和灰度色调，使影像解析更轻松。

参考第20-23页的规格是否可用。




乳腺影像多合一

RadiForce RX1270在阅片室的舒适性和功能性之间实现了完美的平衡。凭借其12兆像素 (4200 x 2800) 分辨率和30.9英寸的纤巧尺寸，您可以在一个屏幕上舒适地并排查看多个乳腺影像。此外，显示器还配备了一个背灯，可以柔和地照亮后面的墙壁，从而为准确阅片创造了理想的环境照明。




支持全彩色

艺卓首款带有LTPS (低温多晶硅) 面板的医疗显示器，RX560的最大亮度达到1100 cd / m²，对比度达到与灰阶显示器相似的1500: 1。这样可确保在单个屏幕上准确显示灰阶图像 (如乳腺断层合成术和乳腺X线照相) 以及彩色图像 (如MRI、CT、超声、病理和活检)，以准确检查乳腺组织。

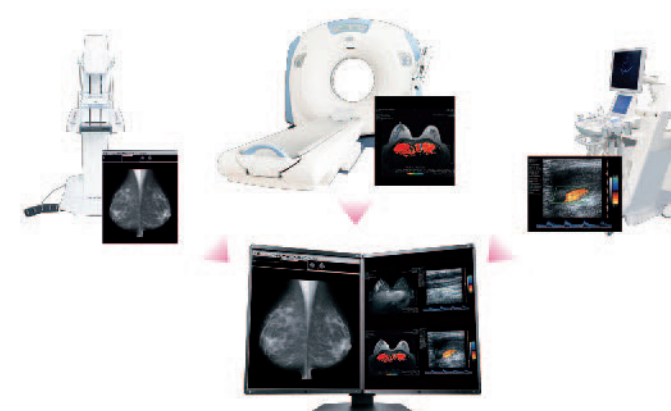

适合乳腺筛查的显示器

GX560采用LTPS (低温多晶硅) 面板提供5兆像素 (2048 x 2560)，最大亮度为2500 cd / m²，像素间距为0.165 mm。它可以精确地再现影像中不易发现的细化或块状病灶，这适用于区分刺状肿块和钙化的细微阴影。此外，12毫秒的响应时间可以平稳有效地观察乳腺断层合成。

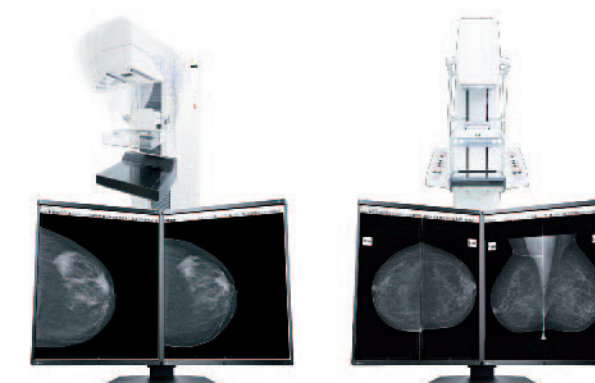


乳腺断层摄影

乳腺诊断

RadiForce® G&R 系列

300万像素高分辨率显示器能够完全显示胸部X射线影像的任何细节。200万像素显示器非常适合作为PACS/HIS/RIS终端,用于查看CR、DR、MRI和CT影像。

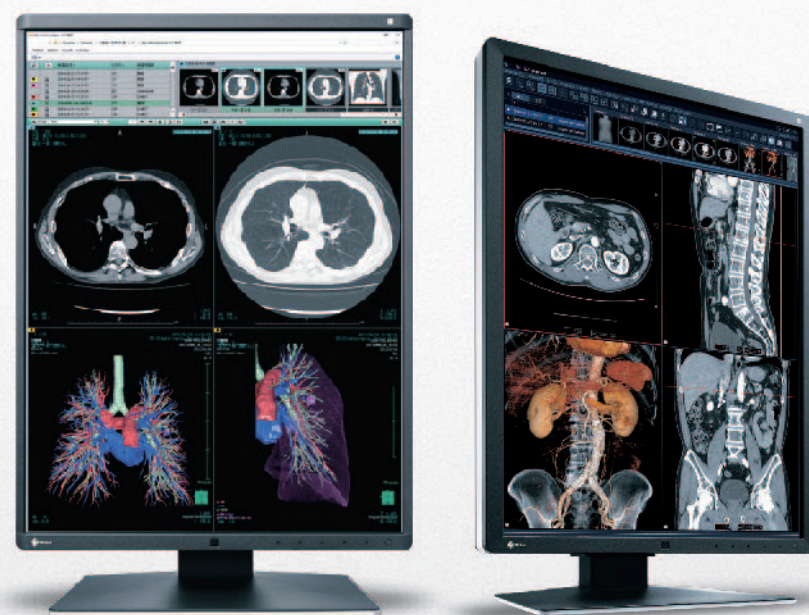

3MP RX360
54.1cm (21.3") 彩色液晶显示器

2MP RX250
54cm (21.3") 彩色液晶显示器




3MP GX340
54cm (21.3") 灰阶液晶显示器



2MP GX240
54 cm (21.3") 灰阶液晶显示器


达到忠于源数据的清晰度

医疗显示器必须以高亮度作为标准性能。然而,要在液晶显示面板上实现高亮度,必须提高像素孔径比。这通常会导致清晰度下降。艺卓的RX360和RX250采用独有的“Sharpness Recovery”技术,可以使下降的清晰度(MTF)恢复原值。这样即使在高亮度水平下,您也可以确保显示器上显示的图像忠于原始数据值。

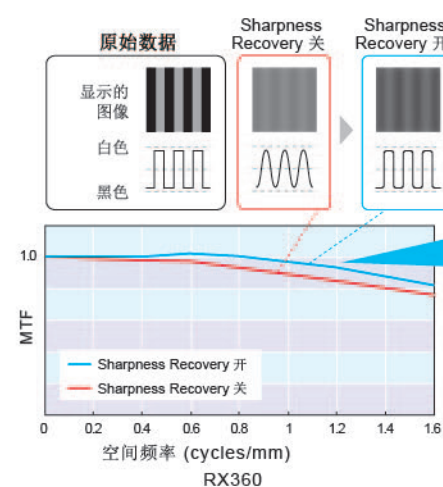


创建自由流畅的工作环境

与之前的型号RX340相比, RX360的宽度、高度和深度分别减少了35 mm、39 mm和46 mm,总占用空间减少了32%,为其它任务节约了更多空间。该显示器的边框宽度减小约70%,可以实现自由流畅的多显示器工作环境。

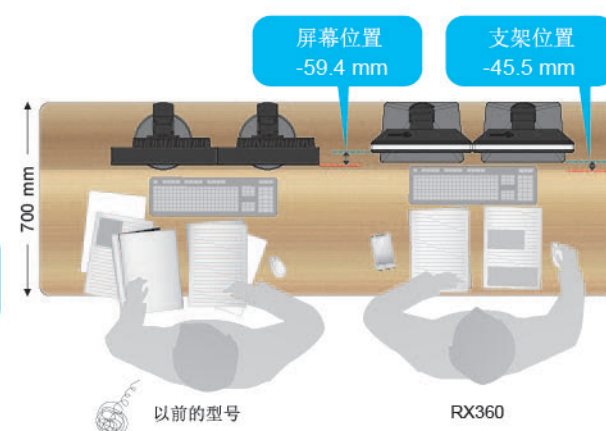

简化多显示器配置


您可以使用RX360和RX250的DisplayPort输出连接按照菊式链接顺序驱动多台显示器。这样即可配置多台显示器,并且无需布线繁多的复杂工作。

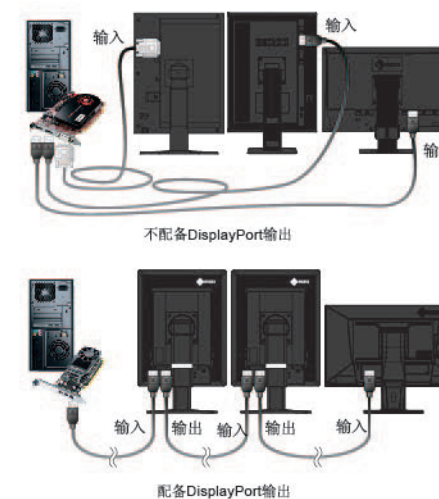


辨别灰阶色调中的细微差别

10位(1024色)同步灰阶显示可再现具有高色深的灰阶图像,从而获得更锐利、更清晰的效果。

10位显示需要配置10位的显卡和10位的阅片软件。

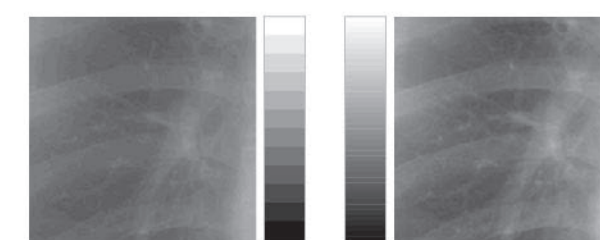

RadiForce® MX 系列

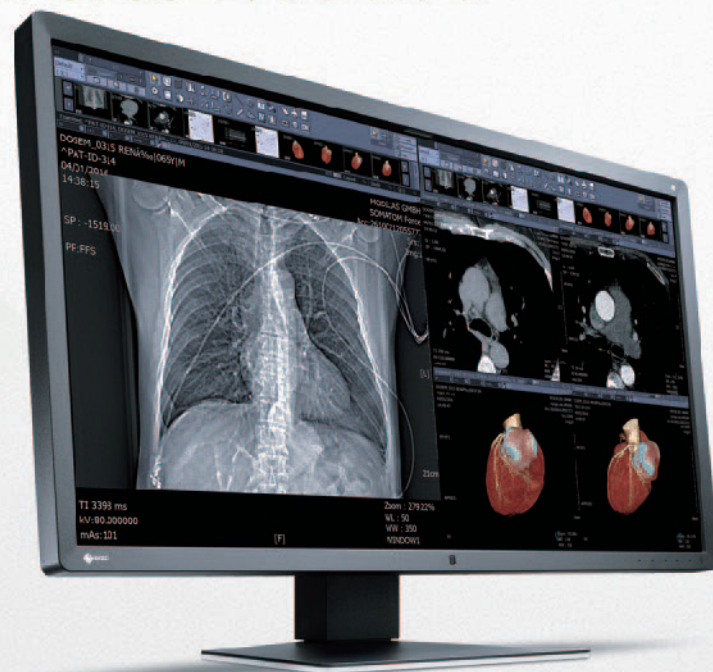

8MP MX315W
79 cm (31.1") 彩色液晶显示器



2MP MX216
54 cm (21.3") 彩色液晶显示器



2.3MP MX242W
61 cm (24.1") 彩色液晶显示器



1MP MX194
48.1 cm (19.0") 彩色液晶显示器



2MP MS236WT
58 cm (23.0") 多点触控彩色液晶显示器


具有优越性价比的医疗审核级显示器, 非常适合查看符合DICOM Part 14标准的MRI和CT医学影像。此外, 该显示器还具有多种分辨率的宽屏和方屏, 可满足医院和诊所的多样化需求。

高性价比

对于使用临床记录作为影像参考的环境, MX系列可提供更加经济高效的解决方案, 让您能够查看符合DICOM Part 14 标准的医学影像, 同时节省大量开支。

高分辨率改善工作流程


MX315W具有MX系列最高的分辨率, 可以在31.1英寸大屏幕上显示800万像素 (4096 x 2160像素) 影像信息。MX315W增加了视觉空间和自由布局, 可以并排显示各种检查影像, 比如平铺格式的CT和MRI影像。这样可同时查看新旧扫描影像并进行对比, 大大提高效率。

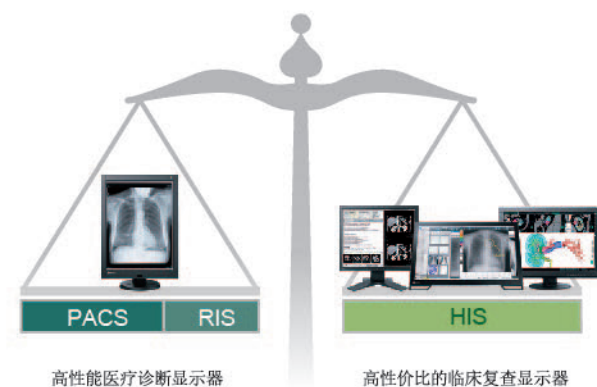

自适应显示

在安装附带的RadiCS LE质量控制软件后配置显示器时, 您可以将Image Rotation Plus功能与内置重力传感器连接, 以便屏幕根据显示器的方向自动切换到纵向或横向模式。

适用于 MX242W 和 MX216。

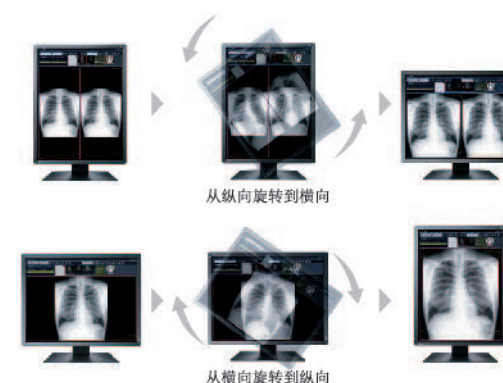

流畅细致的书写

MS236WT支持手指及触控笔输入, 可以轻松地将细小而详细的文字写入医疗记录。




MS236WT显示器配备了防误触功能, 即使您的手直接放在屏幕上, 也不会导致任何意外的触控输入, 确保您可以专注于书写。
防误触最小激活面积为2X2厘米。



显示器质量控制解决方案

RadiCS® & RadiNET® Pro

随着无胶片影像在医疗行业中的广泛应用,长期保证显示器的医疗成像质量正变得越来越重要。凭借专业显示器厂商的丰富知识和深厚经验,艺卓针对诊断精度和综合管理需求提供显示器质量控制解决方案,帮助提高医疗服务质量。

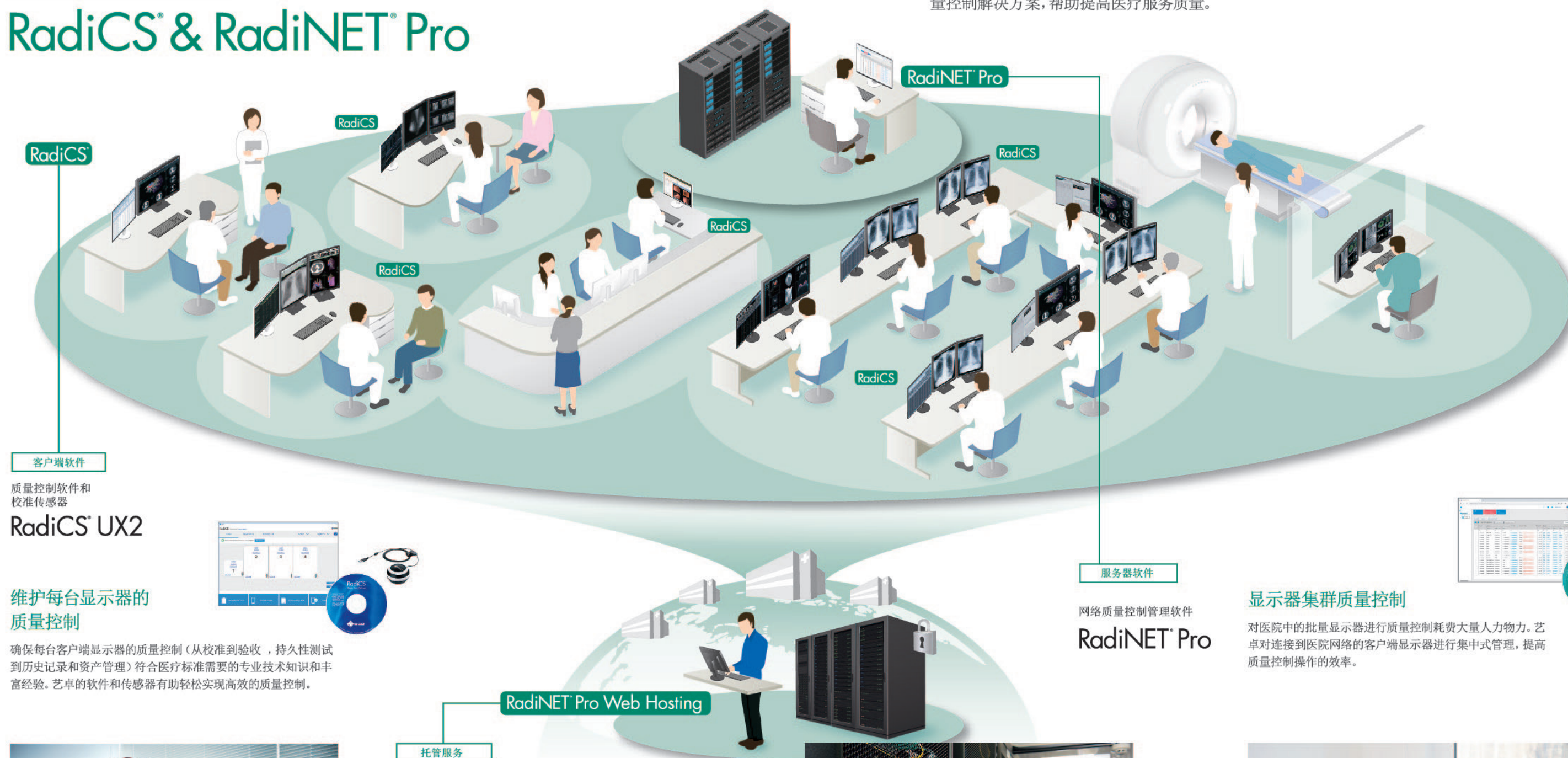

RadiCS®

RadiCS

RadiCS

RadiNET® Pro

RadiCS

RadiCS

客户端软件

质量控制软件和
校准传感器

RadiCS® UX2

维护每台显示器的 质量控制

确保每台客户端显示器的质量控制(从校准到验收,持久性测试到历史记录和资产管理)符合医疗标准需要的专业技术知识和丰富经验。艺卓的软件和传感器有助轻松实现高效的质量控制。

服务器软件

网络质量控制管理软件

RadiNET® Pro

显示器集群质量控制

对医院中的批量显示器进行质量控制耗费大量人力物力。艺卓对连接到医院网络的客户端显示器进行集中式管理,提高质量控制操作的效率。

RadiNET Pro Web Hosting



托管服务

网络质量控制管理服务器

RadiNET® Pro Web Hosting

专家级质量控制服务使用户放心

安装并维护质量控制操作的服务器是一笔重要的投入。艺卓将为您安装并托管网络服务器以便对所有联网的显示器进行高效的集中式控制。

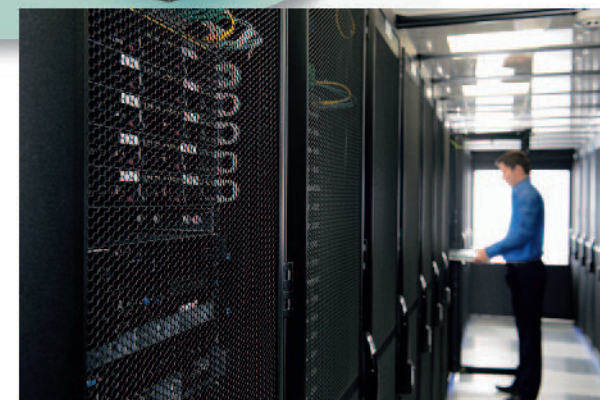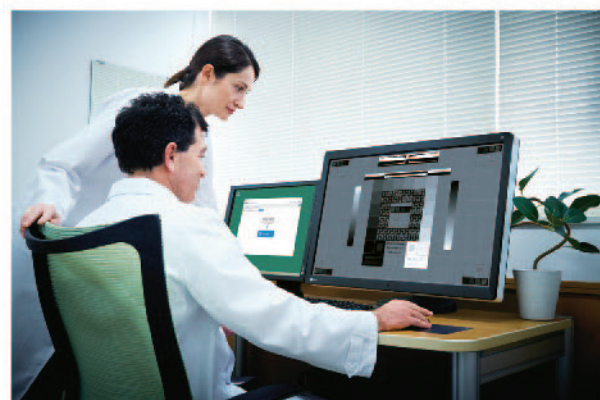

规格



型号种类		RX1270-BK: 防眩光涂层, 带底座, 黑色 RX1270-ARBK: 防反射涂层, 带底座, 黑色	RX850-BK: 防眩光涂层, 带底座, 黑色 RX850-ARBK: 防反射涂层, 带底座, 黑色	RX660-BK: 防眩光涂层, 带底座, 黑色 RX660-ARBK: 防反射涂层, 带底座, 黑色
面板	类型	彩色 (IPS)	彩色 (IPS)	彩色 (IPS)
	背光	LED	LED	LED
	尺寸	78.4 cm / 30.9"	79 cm / 31.1"	76 cm / 30.0"
	物理分辨率	4200 x 2800 (3-2 长宽比)	4096 x 2160 (17:9 长宽比)	3280 x 2048 (16:10 长宽比)
	显示尺寸 (水平 x 垂直)	652.7 x 435.1 mm	697.9 x 368.0 mm	645.5 x 403.0 mm
	点距	0.1554 x 0.1554 mm	0.1704 x 0.1704 mm	0.1968 x 0.1968 mm
	显示色彩/灰阶	10位色彩 (DisplayPort): 10.7亿选自5430亿调色板 (13位) 8位色彩: 1677万选自5430亿色 (13位)	10位色彩 (DisplayPort): 10.7亿选自680亿调色板 (12位) 8位色彩: 1677万选自680亿调色板 (12位)	10位色彩 (DisplayPort): 10.7亿选自5430亿调色板 (13位) 8位色彩: 1677万选自5430亿调色板 (13位)
	可视角度 (水平/垂直)	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
	最大亮度	1200 cd/m²	850 cd/m²	1000 cd/m²
	校准时推荐亮度	500 cd/m²	500 cd/m²	500 cd/m²
	对比度	1500:1	1450:1	1500:1
	响应时间	12 ms (黑-白-黑)	20 ms (黑-白-黑)	25 ms (黑-白-黑)
视频信号	输入端口	DisplayPort x 2, HDMI	DisplayPort x 2, DVI-D (双通道) x 2 (需要两个输入端口)	DisplayPort x 2, DVI-D (双通道)
	输出端口	—	—	DisplayPort (菊式链接)
	数字扫描频率 (水平/垂直)	31 - 175 kHz / 29 - 61 Hz	31 - 140 kHz / 59 - 61 Hz	31 - 127 kHz / 22 - 61 Hz
USB	上行	USB 2.0: Type-B x 2	USB 2.0: Type-B	USB 2.0: Type-B x 2
	下行	USB 2.0: Type-A x 3	USB 2.0: Type-A x 2	USB 2.0: Type-A x 3
功率	电源规格	AC 100 - 240 V: 50 / 60 Hz	AC 100 - 120 V, 200 - 240 V: 50 / 60 Hz	AC 100 - 240 V: 50 / 60 Hz
	额定功耗	77 W	111 W	93 W
	最大功耗	188 W	227 W	190 W
	节电模式	少于 2 W	少于 6 W	少于 1.6 W
传感器		背光灯传感器、集成前置传感器、环境亮度传感器	背光灯传感器、集成前置传感器、人体感应传感器、环境亮度传感器	背光灯传感器、集成前置传感器、人体感应传感器、环境亮度传感器
特性和功能	亮度稳定	有	有	有
	数字均匀度均衡器 (DUE)	有	有	有
	混合伽玛 PXL	有	—	有
	Work-and-Flow	Hide-and-Seek, Switch-and-Go, Point-and-Focus	—	Hide-and-Seek, Switch-and-Go, Point-and-Focus
	预设模式	CAL Switch (DICOM, CAL1, CAL2, Custom, sRGB, Text)	CAL Switch (DICOM, Custom, CAL1, CAL2, CAL3, Hybrid-y, sRGB, Text)	CAL Switch (DICOM, CAL1, CAL2, Custom, sRGB, Text)
	OSD 语言	英语、法语、德语、意大利语、日语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文	英语、法语、德语、意大利语、日语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文	英语、法语、德语、意大利语、日语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文
物理规格	净重	15.6 kg	22.4 kg (含AC 适配器)	14.2 kg
	净重 (不包括底座)	11.5 kg	15.8 kg	10.1 kg
	安装孔距 (VESA 标准)	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm
认证及标准 ¹		CE (Medical Device), EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, EAC	CE (Medical Device), EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, EAC	CE (Medical Device), EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, EAC
FDA ^{1, 2, 3}		510(k) Clearance for Breast Tomosynthesis, Mammography, and General Radiography	510(k) Clearance for Breast Tomosynthesis, Mammography, and General Radiography	510(k) Clearance for General Radiography
专用软件		显示器质量控制软件 RadiCS 支持	支持	支持
附件	信号线	DisplayPort (3 m) x 2, HDMI (2 m)	Dual Link DVI-D (3 m) x 2, DisplayPort (3 m) x 2	Dual Link DVI-D (3 m), DisplayPort (3 m) x 2, DisplayPort (0.28 m)
	其他	AC 电源线 (3 m)、USB 线 (3 m) x 2、电源线集线器、光盘 (RadiCS LE、PDF 安装手册)、使用指南	AC 电源线 (3 m)、AC 适配器、USB 线 (3 m)、电源线集线器、光盘 (RadiCS LE、PDF 使用说明、PDF 安装手册)、使用指南	AC 电源线 (3 m)、USB 线 (3 m) x 2、电源线集线器、光盘 (RadiCS LE、PDF 安装手册)、使用指南
质保期		五年	五年	五年
尺寸 (单位: mm) 旋转				

RX560-BK-MD: 防眩光涂层, 双屏, 双支架, 黑色 RX560-ARBK-MD: 防反射涂层, 双屏, 双支架, 黑色 RX560-BK: 防眩光涂层, 单屏, 带底座, 黑色 RX560-ARBK: 防反射涂层, 单屏, 带底座, 黑色	GX560-BK-MD: 防眩光涂层, 双屏, 双支架, 黑色 GX560-ARBK-MD: 防反射涂层, 双屏, 双支架, 黑色 GX560-BK: 防眩光涂层, 单屏, 带底座, 黑色 GX560-ARBK: 防反射涂层, 单屏, 带底座, 黑色
彩色 (IPS)	灰阶 (IPS)
LED	LED
54.1 cm / 21.3"	54.1 cm / 21.3"
2048 x 2560 (4:5 长宽比)	2048 x 2560 (4:5 长宽比)
337.9 x 422.4 mm	337.9 x 422.4 mm
0.165 x 0.165 mm	0.165 x 0.165 mm
10位色彩 (DisplayPort): 10.7亿选自5430亿调色板 (13位) 8位色彩: 1677万选自5430亿调色板 (13位)	10位色彩 (DisplayPort): 1,024 选自16,369 调色板 (14位) 8位色彩: 256 选自16,369 调色板 (14位)
178° / 178°	178° / 178°
1100 cd/m²	2500 cd/m²
500 cd/m²	1000 cd/m², 600 cd/m²
1500:1	1700:1
12 ms (黑-白-黑)	12 ms (黑-白-黑)
DisplayPort, DVI-D (双通道)	DisplayPort x 2, DVI-D (双通道)
DisplayPort (菊式链接)	DisplayPort (菊式链接)
31 - 135 kHz / 23 - 61 Hz	31 - 135 kHz / 23 - 61 Hz
USB 2.0: Type-B	USB 2.0: Type-B x 2
USB 2.0: Type-A x 2	USB 2.0: Type-A x 2
AC 100 - 240 V: 50 / 60 Hz	AC 100 - 240 V: 50 / 60 Hz
43 W	28 W
87 W	79 W
少于 1 W	少于 1 W
背光灯传感器、集成前置传感器、人体感应传感器、环境亮度传感器	背光灯传感器、集成前置传感器、人体感应传感器、环境亮度传感器
有	有
有	有
有	—
Point-and-Focus	Switch-and-Go, Point-and-Focus
CAL Switch (DICOM, CAL1, CAL2, Custom, sRGB, Text)	CAL Switch (DICOM, CAL1, CAL2, Text)
英语、法语、德语、意大利语、日语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文	英语、法语、德语、意大利语、日语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文
RX560-MD, RX560-AR-MD: 17.3 kg RX560, RX560-AR: 8.1 kg 5.3 kg	GX560-MD, GX560-AR-MD: 17.1 kg GX560, GX560-AR: 8 kg 5.2 kg
100 x 100 mm	100 x 100 mm
RX560, RX560-AR: CE (Medical Device), EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, EAC	GX560, GX560-AR: CE (Medical Device), EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, EAC
510(k) Clearance for Breast Tomosynthesis, Mammography, and General Radiography	510(k) Clearance for Breast Tomosynthesis, Mammography, and General Radiography
支持	支持
RX560-MD, RX560-AR-MD: Dual Link DVI-D (3 m) x 2, DisplayPort (3 m) x 2, DisplayPort (1 m) RX560, RX560-AR: Dual Link DVI-D (3 m), DisplayPort (3 m)	GX560-MD, GX560-AR-MD: DisplayPort (3 m) x 4, DisplayPort (1 m) GX560, GX560-AR: DisplayPort (3 m) x 2
RX560-MD, RX560-AR-MD: AC 电源线 (3 m) x 2、USB 线 (3 m) x 2、光盘 (RadiCS LE、PDF 安装手册)、使用指南 RX560, RX560-AR: AC 电源线 (3 m)、USB 线 (3 m)、光盘 (RadiCS LE、PDF 安装手册)、使用指南	GX560-MD, GX560-AR-MD: AC 电源线 (3 m) x 2、USB 线 (3 m) x 4、光盘 (RadiCS LE、PDF 安装手册)、使用指南 GX560, GX560-AR: AC 电源线 (3 m)、USB 线 (3 m) x 2、光盘 (RadiCS LE、PDF 安装手册)、使用指南
五年	五年


¹ 请联系艺卓集团公司或本国分销商获取最新信息。
² 使用 FDA 510(k) 认证的显示器进行诊断。
³ 获得常规放射检查认证的型号并不支持显示用于诊断的数字式乳腺图像。

规格



型号种类		RX360-BK: 防眩光涂层, 带底座, 黑色 RX360-ARBK: 防反射涂层, 带底座, 黑色	GX340-CL-BK: 白色背光, 带底座, 黑色 GX340-CL-P-BK: 配对, 带底座, 黑色	RX250-BK: 防眩光涂层, 带底座, 黑 RX250-ARBK: 防反射涂层, 带底座, 黑色	GX240-CL-BK: 白色背光, 带底座, 黑色 GX240-CL-BK-P: 配对, 带底座, 黑色
面板	类型	彩色 (IPS)	灰阶 (IPS)	彩色 (IPS)	灰阶 (IPS)
	背光	LED	LED	LED	LED
	尺寸	54.1 cm / 21.3"	54 cm / 21.3"	54 cm / 21.3"	54 cm / 21.3"
	物理分辨率	1536 x 2048 (3:4 长宽比)	1536 x 2048 (3:4 长宽比)	1200 x 1600 (3:4 长宽比)	1200 x 1600 (3:4 长宽比)
	显示尺寸 (水平 x 垂直)	324.9 x 433.2 mm	324.8 x 433.1 mm	324.0 x 432.0 mm	324.0 x 432.0 mm
	点距	0.2115 x 0.2115 mm	0.2115 x 0.2115 mm	0.270 x 0.270 mm	0.270 x 0.270 mm
	显示色彩/灰阶	10位色彩 (DisplayPort): 10.7亿选自5430亿调色板 (13位) 8位色彩: 1677万选自5430亿调色板 (13位)	10位色彩 (DisplayPort): 1,024选自16,369调色板 (14位) 8位色彩: 256选自16,369亿调色板 (14位)	10位色彩 (DisplayPort): 10.7亿选自5430亿调色板 (13位) 8位色彩: 1677万选自5430亿调色板 (13位)	10位色彩 (DisplayPort): 10.7亿选自5430亿调色板 (13位) 8位色彩: 1677万选自5430亿调色板 (13位)
	可视角度 (水平/垂直)	178° / 178°	176° / 176°	178° / 178°	176° / 176°
	最大亮度	1100 cd/m²	1200 cd/m²	800 cd/m²	1200 cd/m²
	校准时推荐亮度	500 cd/m²	500 cd/m²	400 cd/m²	500 cd/m²
	对比度	1500:1	1400:1	1400:1	1400:1
触摸屏	响应时间	12 ms (黑-白-黑)	40 ms (黑-白-黑)	20 ms (黑-白-黑)	40 ms (黑-白-黑)
	类型	—	—	—	—
	接触点	—	—	—	—
	表面处理	—	—	—	—
	通信协议	—	—	—	—
	触摸寿命	—	—	—	—
	触控硬度	—	—	—	—
视频信号	兼容的操作系统	—	—	—	—
	输入端口	DisplayPort x 2, DVI-D (双通道)	DisplayPort, DVI-D (双通道)	DisplayPort, DVI-D	DisplayPort, DVI-D
	输出端口	DisplayPort (菊式链接)	—	DisplayPort (菊式链接)	—
	数字扫描频率 (水平/垂直)	31 - 127 kHz / 29 - 61.5 Hz	31 - 127 kHz / 29 - 61.5 Hz	31 - 100 kHz / 59 - 61 Hz	31 - 100 kHz / 59 - 61 Hz
	模拟扫描频率 (水平/垂直)	—	—	—	—
USB	同步格式	—	—	—	—
	上行	USB 2.0: Type-B x 2	USB 2.0: Type-B	USB 2.0: Type-B	USB 2.0: Type-B
	下行	USB 2.0: Type-A x 2	USB 2.0: Type-A x 2	USB 2.0: Type-A x 2	USB 2.0: Type-A x 2
功率	电源规格	AC 100 - 240 V: 50 / 60 Hz	AC 100 - 120 V, 200 - 240 V: 50 / 60 Hz	AC 100 - 240 V: 50 / 60 Hz	AC 100 - 120 V, 200 - 240 V: 50 / 60 Hz
	额定功耗	34 W	36 W	38 W	29 W
	最大功耗	74 W	90 W	79 W	76 W
	节电模式	少于 1 W	少于 1.6 W	少于 1 W	少于 1.6 W
传感器	背光灯传感器、集成前置传感器、人体感应传感器、环境亮度传感器	有	有	有	有
	背光灯传感器、集成前置传感器、人体感应传感器、环境亮度传感器	有	有	有	有
特性和功能	亮度稳定	有	有	有	有
	数字均匀度均衡器 (DUE)	有	有	有	有
	混合伽玛 PXL	有	—	有	—
	Work-and-Flow	Hide-and-Seek, Switch-and-Go, Point-and-Focus	—	Point-and-Focus	—
	预设模式	CAL Switch (DICOM, CAL1, CAL2, Custom, sRGB, Text)	CAL Switch (DICOM, CAL1, CAL2, Hybrid-y)	CAL Switch (DICOM, CAL1, CAL2, Custom, sRGB, Text)	CAL Switch (DICOM, CAL1, CAL2, Hybrid-y)
	OSD 语言	英语、法语、德语、意大利语、日语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文	英语、法语、德语、意大利语、日语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文	英语、法语、德语、意大利语、日语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文	英语、法语、德语、意大利语、日语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文
物理规格	净重	8 kg	10.2 kg	8.2 kg	10.2 kg
	净重 (不包括底座)	5.2 kg	7.5 kg	5.4 kg	7.5 kg
	安装孔距 (VESA 标准)	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm
认证及标准 ¹		CE (Medical Device), EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, EAC	CE (Medical Device), EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, EAC	CE (Medical Device), EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, EAC	CE (Medical Device), EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, EAC
FDA ^{1, 2, 3}		510(k) Clearance for General Radiography	510(k) Clearance for General Radiography	510(k) Clearance for General Radiography	510(k) Clearance for General Radiography
专用软件	显示器质量控制软件 RadiCS	支持	支持	支持	支持
	信号线	DisplayPort(3 m), DVI	Dual Link DVI-D (3 m), DisplayPort (3 m)	DVI-D (3 m), DisplayPort (3 m)	DVI-D (3 m), DisplayPort (3 m)
附件	其他	AC 电源线 (3 m)、USB 线 (3 m) x 2、光盘 (RadiCS LE、PDF 使用说明、PDF 安装手册)、使用指南	AC 电源线 (3 m)、USB 线 (3 m)、光盘 (RadiCS LE、用户手册)	AC 电源线 (3 m)、USB 线 (3 m)、光盘 (RadiCS LE、PDF 使用说明、PDF 安装手册)、使用指南	AC 电源线 (3 m)、USB 线 (3 m)、光盘 (RadiCS LE、PDF 安装手册)、使用指南
质保期		五年	五年	五年	五年
尺寸 (单位: mm)					
旋转					
MS236WT 不支持旋转模式。					

- ¹ 请联系艺卓集团公司或本国分销商获取最新信息。
² 使用 FDA 510(k) 认证的显示器进行诊断。
³ 获得常规放射检查认证的型号并不支持显示用于诊断的数字式乳腺图像。

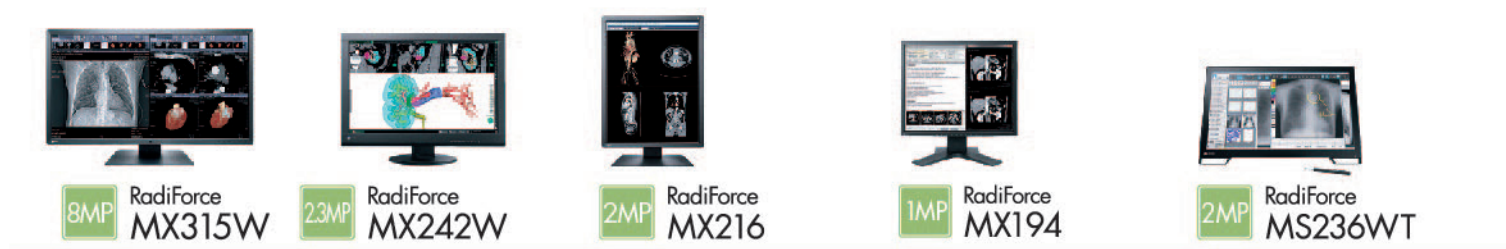

MX315W-BK: 带底座, 黑色	MX242W-BK: 带底座, 黑色	MX216-BK: 带底座, 黑色	MX194-BK: 带底座, 黑色	MS236WT-LGY: 斜躺式支架, 灰色 MS236WT-LBK: 斜躺式支架, 黑色 MS236WT-FGY: 不带底座, 灰色 MS236WT-FBK: 不带底座, 黑色
彩色 (IPS)	彩色 (IPS)	彩色 (IPS)	彩色 (VA)	彩色 (IPS)
LED	LED	LED	LED	LED
79 cm / 31.1"	61 cm / 24.1"	54 cm / 21.3"	48.1 cm / 19.0"	58 cm / 23.0"
4096 x 2160 (17:9 长宽比)	1920 x 1200 (16:10 长宽比)	1200 x 1600 (3:4 长宽比)	1280 x 1024 (5:4 长宽比)	1920 x 1080 (16:9 长宽比)
697.9 x 368.0 mm	518.4 x 324.0 mm	324.0 x 432.0 mm	376.3 x 301.0 mm	509.2 x 286.4 mm
0.1704 x 0.1704 mm	0.270 x 0.270 mm	0.270 x 0.270 mm	0.294 x 0.294 mm	0.265 x 0.265 mm
10位色彩 (DisplayPort): 10.7亿选自5430亿调色板 (13位) 8位色彩: 1677万选自5430亿调色板 (13位)	10位色彩 (DisplayPort): 10.7亿选自5430亿调色板 (13位) 8位色彩: 1677万选自5430亿调色板 (13位)	10位色彩 (DisplayPort): 10.7亿选自5430亿调色板 (13位) 8位色彩: 1677万选自5430亿调色板 (13位)	10位色彩 (DisplayPort): 10.7亿选自5430亿调色板 (13位) 8位色彩: 1677万选自5430亿调色板 (13位)	8位色彩: 1677万选自10.6亿调色板 (10位)
178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
450 cd/m²	350 cd/m²	500 cd/m²	350 cd/m²	260 cd/m²
—	—	—	—	—
1300:1	1000:1	1500:1	2000:1	1000:1
20 ms (黑-白-黑)	12 ms (黑-白-黑)	20 ms (黑-白-黑)	20 ms (黑-白-黑)	11 ms (灰-灰)
—	—	—	—	投射电容式
—	—	—	—	10
—	—	—	—	防眩光涂层
—	—	—	—	USB
—	—	—	—	至少5千万次触摸
—	—	—	—	5 H
—	—	—	—	Windows 10 / 8.1 / 7 (64 位, 32 位)
DisplayPort x 2, DVI-D (双通道)	DisplayPort, DVI-I	DisplayPort, DVI-D	DisplayPort, DVI-D, D-Sub mini 15 pin	DisplayPort (HDCP 1.3), DVI-D (HDCP 1.4), D-Sub mini 15 pin
DisplayPort (菊式链接)	—	DisplayPort (菊式链接)	—	—
31 - 134 kHz / 14 - 61 Hz	31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz	31 - 100 kHz / 59 - 61 Hz	31 - 64 kHz / 59 - 61 Hz	DVI: 31 - 64 kHz / 59 - 61 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz) DisplayPort: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz)
—	26 - 76 kHz / 49 - 71 Hz	—	24.8 - 80 kHz / 50 - 75 Hz	31 - 81 kHz / 55 - 76 Hz
—	独立	—	独立	独立
USB 2.0: Type-B x 2	USB 2.0: Type-B	USB 2.0: Type-B	USB 2.0: Type-B	USB 2.0: Type-B
USB 2.0: Type-A x 3	USB 2.0: Type-A x 2	USB 2.0: Type-A x 2	—	USB 2.0: Type-A x 2
AC 100 - 240 V: 50 / 60 Hz	AC 100 - 240 V: 50 / 60 Hz	AC 100 - 240 V: 50 / 60 Hz	AC 100 - 240 V: 50 / 60 Hz	AC 100 - 240 V: 50 / 60 Hz
67 W	31 W	26 W	15 W	19 W
125 W	68 W	55 W	28 W	42 W
少于 1.6 W	少于 0.5 W	少于 0.6 W	少于 0.6 W	少于 0.7 W
背光灯传感器、集成前置传感器、人体感应传感器、环境亮度传感器	背光灯传感器	背光灯传感器、集成前置传感器、环境亮度传感器	背光灯传感器	—
有	有	有	有	—
有	有	有	有	—
—	—	有	—	—
Hide-and-Seek, Switch-and-Go, Point-and-Focus	—	Point-and-Focus	—	—
CAL Switch (DICOM, CAL1, CAL2, Custom, sRGB, Text)	CAL Switch (DICOM, Custom, CAL, Text)	CAL Switch (DICOM, CAL1, CAL2, Custom, sRGB, Text)	CAL Switch (DICOM, CAL1, CAL2, Custom, sRGB, Text)	色彩模式 (User1, User2, sRGB, DICOM)
英语、法语、德语、意大利语、日语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文	英语、法语、德语、意大利语、日语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文	英语、法语、德语、意大利语、日语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文	英语、法语、德语、意大利语、日语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文	英语、法语、德语、意大利语、日语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文
11.7 kg	8.7 kg	7.6 kg	6 kg	6.6 kg
7.5 kg	6 kg	4.7 kg	4.2 kg	6 kg
100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm
CE (Medical Device), EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, EAC	CE (Medical Device), EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, EAC	CE (Medical Device), EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, EAC	CE (Medical Device), EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, EAC	CE (Medical Device), EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, EAC
510(k) Clearance for General Radiography	510(k) Clearance for General Radiography	510(k) Clearance for General Radiography	510(k) Clearance for General Radiography	Class I
支持	支持	支持	支持	—
Dual Link DVI-D (3 m), DisplayPort (3 m) x 2, DisplayPort (0.28 m)	DVI-D (3 m), DisplayPort (3 m)	DisplayPort (3 m)	DisplayPort (3 m)	DVI-D (3 m), DisplayPort (3 m)
AC 电源线 (3 m)、USB 线 (3 m) x 2、光盘 (RadiCS LE、PDF 使用说明、PDF 安装手册)、使用指南	AC 电源线 (3 m)、USB 线 (3 m)、光盘 (RadiCS LE、PDF 使用说明、PDF 安装手册)	AC 电源线 (3 m)、USB 线 (3 m)、光盘 (RadiCS LE、PDF 安装手册)、使用指南	AC 电源线 (3 m)、USB 线 (3 m)、光盘 (RadiCS LE、PDF 安装手册)、使用指南	AC 电源线 (3 m)、USB 线 (3 m)、音频线 (2.1 m)、触控笔、触控笔支架、光盘 (用户手册、触摸屏驱动、TPoffset)、清洁布、膜片
五年	五年	五年	五年	三年

显卡

为有效发挥高分辨率RadiForce显示器的卓越性能,我们建议您为其配备艺卓专用显卡。每种显卡都支持RadiForce医疗显示器解决方案,并具备精确诊断所需的原始分辨率和高性能。



MED-XN92 MED-XN72 MED-XN71 MED-XN51LP MED-XN31LP

总线接口	PCI-Express x16	PCI-Express x16	PCI-Express x16	PCI-Express x16	PCI-Express x16
兼容操作系统	Windows 10	Windows 10	Windows 10, 8.1, 7	Windows 10, 8.1, 7	Windows 10, 8.1, 7
内存	8 GB	5 GB	5 GB	4 GB	2 GB
显示色彩/灰阶	10位 (DisplayPort, USB Type-C), 8位	10位 (DisplayPort), 8位	10位、8位	10位、8位	10位、8位
输出端口	DisplayPort x 3 (支持菊式链接)、USB Type-C x 1	DisplayPort x 4 (支持菊式链接)	DisplayPort x 4 (支持菊式链接)	Mini DisplayPort x 4 (支持菊式链接)	Mini DisplayPort x 3 (支持菊式链接)
供应转换电缆	DisplayPort - DVI-D	DisplayPort - DVI-D	DisplayPort - DVI-D	Mini DisplayPort - DisplayPort x 2, Mini DisplayPort - DVI-D	Mini DisplayPort - DisplayPort x 2, Mini DisplayPort - DVI-D
显示器最大连接数	4台显示器	4台显示器	4台显示器	4台显示器	4台显示器
最大功耗	125 W (不使用USB Type-C 供电) 160 W (使用USB Type-C 供电)	75 W	75 W	47 W	30 W
插槽	1	1	1	1	1
机箱	标准	标准	标准	标准&低剖面	标准&低剖面
尺寸 (水平 x 垂直)	241.3 x 104.9 mm	200.7 x 111.1 mm	200.7 x 111.2 mm	153.9 x 68.9 mm	153.9 x 68.9 mm
RX1270	是	是	是	是	是
RX850	是	是	是	是	是
RX660	是	是	是	是	是
RX560	是	是	是	是	是
GX560	是	是	是	是	是
RX360	是	是	是	是	是
GX340	是	是	是	是	是
RX250	是	是	是	是	是
GX240	是	是	是	是	是
MX315W	是	是	是	是	是
MX242W	是	是	是	是	是
MX216	是	是	是	是	是
MX194	是	是	是	是	是
MS236WT	是	是	是	是	是

显卡的兼容性如有变更,恕不另行通知。请查看艺卓网站了解最新信息。

显示器质量控制解决方案

显示器的质量控制软件和校准传感器

RadiCS[®] UX2

兼容操作系统	Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 SP1 Windows Server 2016 Standard Windows Server 2012 R2 Standard macOS Mojave (10.14) macOS High Sierra (10.13)
显示功能	DICOM Part 14 GSDF、CIE、Exponential (伽玛值)、Log Linear、Linear、用户定义
接口	USB, RS232C (仅Windows)
语言	英语、德语、日语、中文、法语
包装内容	RadiCS DVD-ROM (RadiCS、用户手册)、UX2传感器、用于替换的吸附板、清洁布、UX2传感器使用说明

网络质量控制管理软件

RadiNET[®] Pro

可管理的电脑/显示器数量	最多1000台电脑/8000台显示器
管理员电脑浏览器	Microsoft Windows Internet Explorer 11.0 Google Chrome 73.0 Microsoft Edge 42.1
管理员电脑分辨率	最低 1024 x 768
服务器电脑操作系统	Windows Server 2016 Standard Windows Server 2012 R2 Standard Windows 10 (64-bit) Windows 7 SP1 (64-bit)
服务器电脑数据库	SQL Server 2016 Standard / Express Edition SP2 SQL Server 2014 Standard / Express Edition SP2
服务器电脑硬盘	最小 150 GB
服务器电脑存储容量	最小 4 GB
语言	英语、德语、日语、中文、法语

RadiCS Version Up Kit

升级RadiCS时使用的软件。

RadiCS Client License

在其它商用显示器上使用RadiCS的许可证。

5 Monitor Access License for RadiNET[®] Pro Version 5

使用RadiNET Pro Version 5时,必须以每5台显示器为批次,购买显示器管理授权。



配件

适合阅片室的舒适灯

RadiLight[™]



机身颜色	黑色
电源要求	USB 电源
重量	370 g
尺寸	184 x 185.5 x 15.7 mm
认证与标准	CE, IEC60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, EAC
附件	专用电缆、用户手册、安装支架、垫块、螺丝
质保期	三年

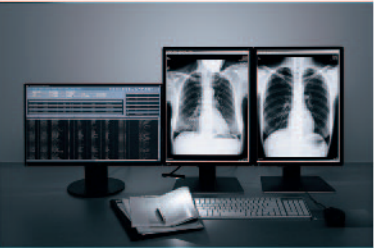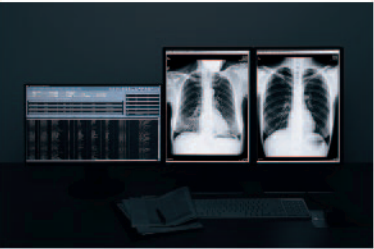

可将亮度调整到10个不同的水平

呵护放射科医生的眼睛

柔和光线缓解眼睛疲劳

RadiLight 连接到RadiForce显示器背面并照亮显示器后面的墙壁。这就减少了集中照射到放射科医生眼睛的光线,从而缓解眼睛疲劳而不会影响阅片室的整体环境照明或屏幕上图像的可见性。



无闪烁

RadiLight 是一种无闪烁的照明解决方案,可缓解眼睛疲劳。

聚光照明

RadiLight Focus 允许您检查或阅读打印的文档或查看您的键盘和其它工具。



容易安装

RadiLight 可轻松附设在显示器支架的背面,因此不占用桌面空间。

创新技术

内置校准传感器



无干扰自动校准

IP 解码监视器



无PC连接

交换机

内部光学粘合



没有光学贴合

光学贴合

面向市场的云解决方案



医疗护理

空中交通管制

图像处理

视觉
技术公司



50多年的专业

研发

制造

质量控制

定制

多领域覆盖

FlexScan

商业应用

ColorEdge

图像处理

CuratOR / RadiForce

医疗护理

DuraVision

安防与监控 / 海事

Raptor / Re/Vue / SafeGuard

空中交通管制


FORIS

家庭娱乐

改进工作流程的软件



两台PC使用单个鼠标

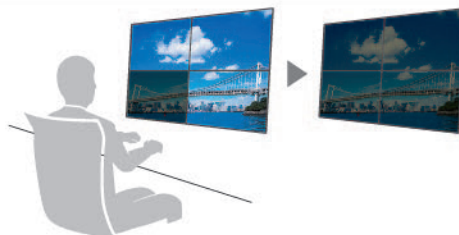

同步调整多台显示器



具有自动调整软件和打印机设置的简化CMS